



Användarmanual ZenSeat® App



Larm-vy

Denna vyn visar pågående larm.

Om inga larm är aktiva ser vyn ut som i detta exemplet.

Aktuellt boende

Tryck här för att byta boende, om tillämbart

Menyrad för att välja vy

- **Larm** - Visar pågående larm.
- **Rum** - Visar en lista över alla rum på boendet som har en aktiv ZenSeat®.
- **Inställningar** - Appinställningar

En blå kvadrat markerar aktuell vy



Pågående Larm - Larmtyper

Rött larm med avföringssymbol

Den boende har inte haft avföring på sin toalett på tre dygn

Rött larm med toalettsymbol

Den boende har suttit 20 minuter eller längre på toaletten

Orange larm med avföringssymbol

Den boende har inte haft avföring på sin toalett på två dygn

Larm för dåligt batteri

Förbered tre nya AA batterier.

Inga toalettbesök

Den boende har inte utfört ett sittande toalettbesök på ett dygn. Stående toalettbesök registreras ej.

The screenshot shows the zenseat® interface for 'Vårdboende123'. It is divided into two main sections: 'Patientlarm' and 'Utrustningslarm'. The 'Patientlarm' section lists four alarms for different rooms: Rum 128 (red icon, 3 days 8 hours 21 minutes, with a green 'Medicinerat' tag), Rum 216 (red icon, 22 min), Rum 122 (orange icon, 2 days 6 hours 34 minutes), and Rum 122 (orange icon, 1 day 2 hours 31 minutes). The 'Utrustningslarm' section lists two alarms: Rum 128 (blue icon, 18% battery, Toalett 00878) and Rum 245 (blue icon, Toalet 123467-980+ aB akjss, 2024-05-02 16:02). Each alarm entry has a right-pointing arrow.

Room	Icon	Duration / Status
Rum 128	Red (Stool)	3 dygn 8 timmar 21 minuter (Medicinerat)
Rum 216	Red (Toilet)	22 min
Rum 122	Orange (Stool)	2 dygn 6 timmar 34 minuter
Rum 122	Orange (Stool)	1 dygn 2 timmar 31 minuter
Rum 128	Blue (Battery)	18% (Toalett 00878)
Rum 245	Blue (Toilet)	2024-05-02 16:02 (Toalet 123467-980+ aB akjss)

Medicinerat

Visar att den boende har fått medicinerat för magen. I detta exemplet har den boende medicinerats två gånger.

Timer - avföringsslarm


Visar hur länge sedan den boende hade avföring på sin toalett senast.

Timer - sittlarm


Visar hur tiden sedan larmet aktiverades. Observera att när larmet aktiveras har den boende suttit 20 minuter på toaletten.

Tryck på ett pågående larm för att öppna vyn för hantering av larmet.

Larmhantering

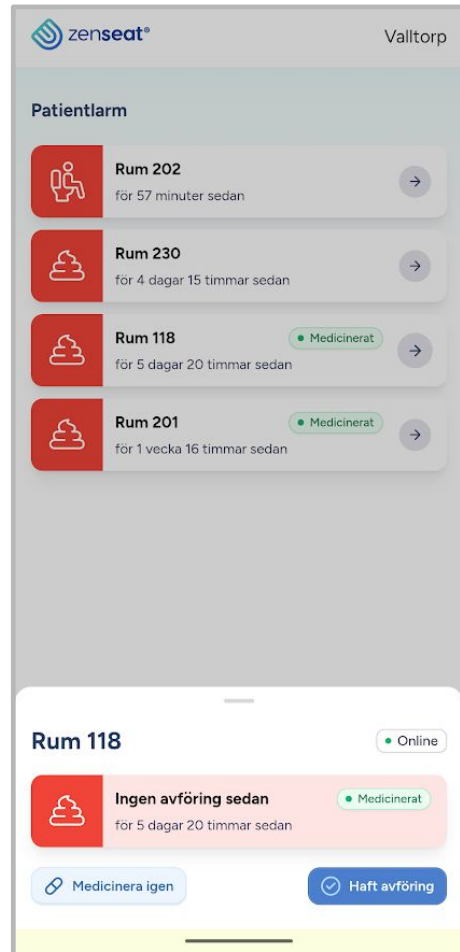

Figur 1

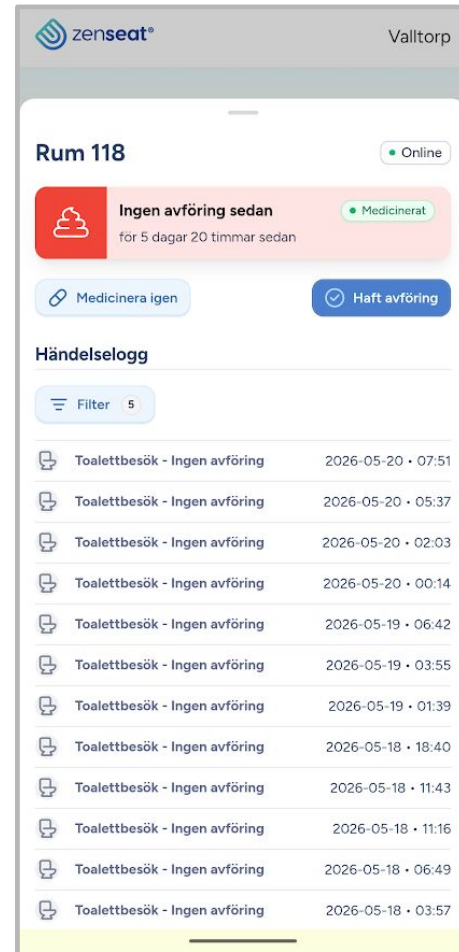

Figur 2


- **Avföringslarm** kvitteras automatiskt om personen haft avföring i sin toalett.
- **Larm för uteblivet toalettbesök** kvitteras automatiskt om den boende går på sin toalett.
- **Larm för toalettbesök längre än 20 minuter** måste kvitteras genom att trycka på larmet och sedan trycka på Hanterat.
- Trycker man på ett aktivt larm i larmvyn öppnar vyn i Figur 1.
- **Utförd medicinering** markeras genom att trycka på knappen Medicinera.
- Om den boende haft avföring någon annanstans kvitteras larmet genom att trycka på **Haft avföring**.
- Dra larmvyn uppåt för att se historiken för två veckor bakåt. Se Figur 2.

Rumsöversikt

Vyn visar samtliga rum för valt boende med en aktiv ZenSeat®.

Rum med ett pågående larm, patientlarm eller utrustningslarm, är rödmarkerade.

Tryck på ett rum för att öppna vyn med händelseloggen.

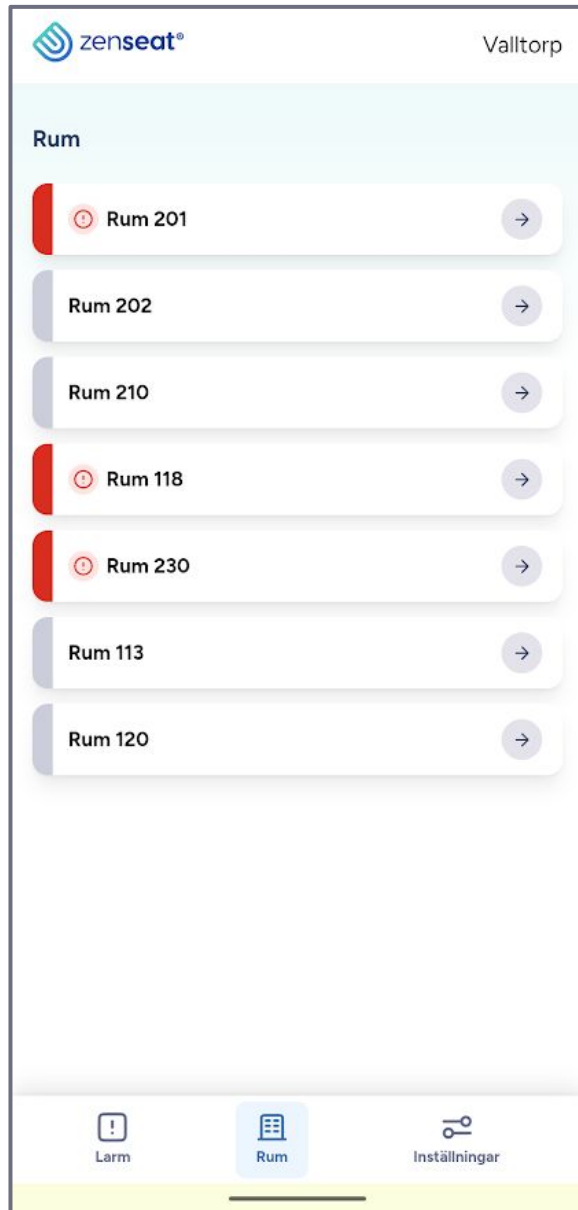

Medicinering

Vid medicinering står det tidpunkt i händelseloggen och initialerna på den som tryckte på knappen.

zenseat® Vårdboende123

Patientlarm

Rum 128

 **Ingen avföring på**
3 dygn 8 timmar 21 minuter

 Medicinera igen  Löst

Händelselogg

	Larm- Avföring Medicinerat 2024-04-12 12:22 av L.M. Medicinerat 2024-04-12 18:09 av P.K.	2024-04-14 • 21:40
	Avföring	2024-04-07 • 11:17
	Ej avföring	2024-04-13 • 07:11
	Ej avföring	2024-04-08 • 08:18
	Avföring	2024-04-07 • 11:17
	Larm- Avföring Medicinerat 2024-04-12 12:22 av L.M.	2024-04-11 • 10:40
	Ej avföring	2024-04-08 • 08:18
	Avföring	2024-04-07 • 11:17
	Ej avföring	2024-04-08 • 08:18


Inställningar

Vy för att välja vårdboende, språk i appen eller byta tidszon.

Här aktiveras även push-notiser för att ge tydligare återkoppling vid nya larm


The screenshot displays the 'zenseat' app interface. At the top, the logo and the name 'Valltorp' are visible. Below this is a list of rooms: 'Rum 201', 'Rum 202', 'Rum 210', and 'Rum 118'. Each room entry has a red status indicator on the left and a right arrow on the right. Overlaid on this is a 'Inställningar' (Settings) modal. The modal has a title bar with 'Inställningar' and a 'Logga ut' (Logout) link. Below the title bar is a toggle for 'Notifikationer' (Notifications), which is currently turned on. Underneath are three dropdown menus: 'Vårdboende' (Care home) set to 'Valltorp', 'Språk' (Language) set to 'Svenska' (Swedish), and 'Tidszon' (Time zone) set to 'Europe/Stockholm'. At the bottom of the modal is a 'Spara' (Save) button.

Batteribyte

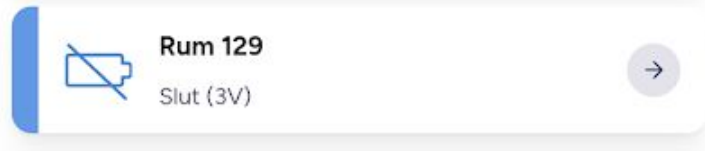

Byt batterier när ZenSeat® appen larmar för Batteri slut.

- Öppna markerad lucka med en T8-mejsel (Torx 8)
- Sätt i tre nya alkaliska AA batterier av long-life typ.
- Säkerställ att luckans gummipackning sitter på plats när luckan sätts tillbaka.
- Larmet kvitteras automatiskt efter nästa toalettbesök.

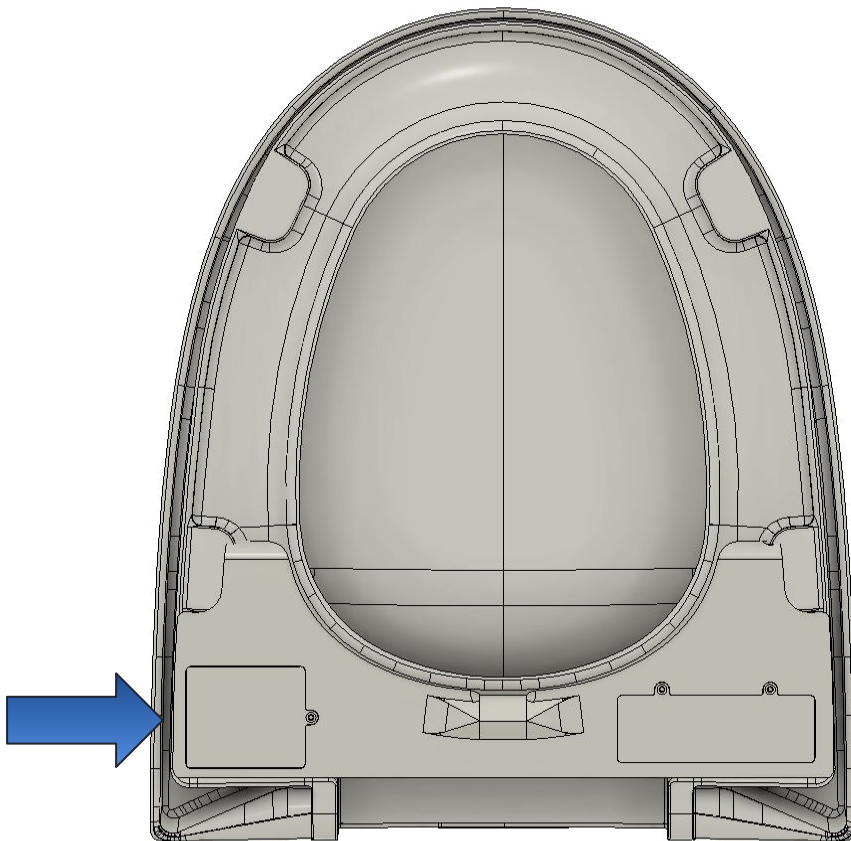

Skapa användare



Hello!

EC Developer have invited you to join them on ZenSeat®.

Register here

If you do not want to accept, you may safely ignore this email. The invitation expires at 9th June at 13:33.

Regards,
ZenSeat

If you're having trouble clicking the "Register here" button, copy and paste the URL below into your web browser: <https://helleringen.test/join/473a2ced-b1e4-4130-b1c7-9b94e5ed047f>

Du får ett mejl med en inbjudan att registrera dig som användare i ZenSeat®.

Klicka på **Register here**



Skapa användare



Gå med i zenseat

Du har blivit inbjuden av **Mathias Anlander** att gå med i ZenSeat. Fyll i dina uppgifter för att skapa ditt konto och få åtkomst.

E-postadress

Förnamn Efternamn

Lösenord

Bekräfta lösenord

Språk

Tidszon

Acceptera inbjudan

- Fyll i dina uppgifter samt önskat lösenord.
- Lösenordet måste bestå av minst 8 tecken.
- Språk och tidszon kan ändras vid behov.
- Tryck på **Acceptera inbjudan**.
- Du förs nu vidare till appen.

Installation - Android

1


Öppna webbläsaren på telefonen och skriv in adressen:

app.zenseat.ai

2

Öppna webbläsarens meny och välj

**Lägg till på
startskärmen**

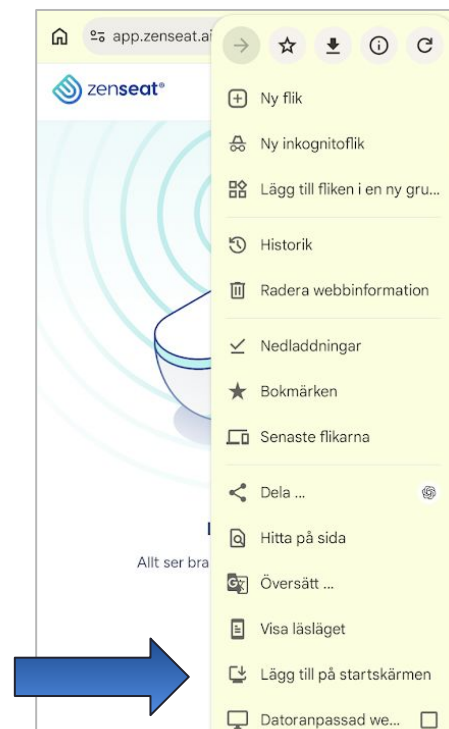

3

Tryck på

Installera




Installation - iPhone

- 1 Öppna webbläsaren på telefonen och skriv in adressen:


app.zenseat.ai

- 2 Välj dela-ikonen längst ner på sidan.

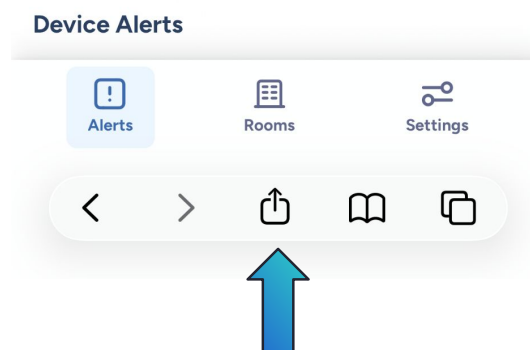

- 3 Scrolla ned och hitta

**Lägg till på
hemskrämen**

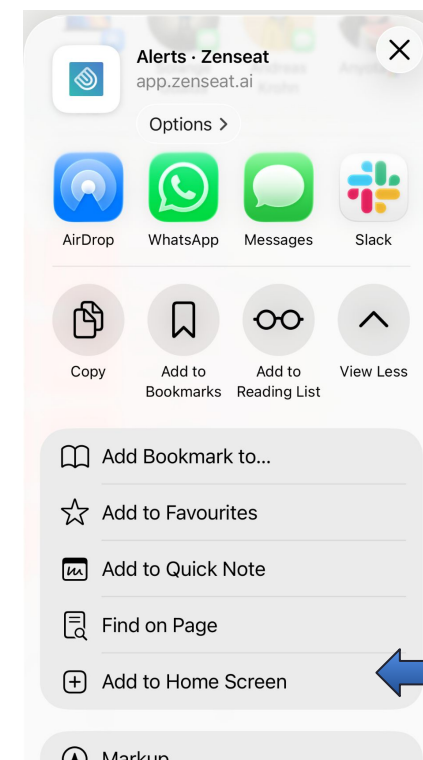



Historik

Datum	Kommentar
2026-05-20	Initialt upprättande av dokument
2026-05-21	Grafisk justering av innehåll