

zenseat®

Användarmanual ZenSeat® App

optisense care

Larm-vy



Denna vyn visar pågående larm.

Om inga larm är aktiva ser vyn ut som i detta exemplet.

Aktuellt boende

Tryck här för att byta boende, om tillämpbart

Menyrad för att välja vy

- **Larm** - Visar pågående larm.
- **Rum** - Visar en lista över alla rum på boendet som har en aktiv ZenSeat®.
- **Inställningar** - Appinställningar

En blå kvadrat markerar aktuell vy

Pågående Larm - Larmtyper


Rött larm med avföringssymbol
Den boende har inte haft avföring på sin toalett på tre dygn

Rött larm med toalettsymbol
Den boende har har suttit 20 minuter eller längre på toaletten

Orange larm med avföringssymbol
Den boende har inte haft avföring på sin toalett på två dygn

Larm för dåligt batteri
Förbered tre nya AA batterier.

Inga toalettbesök
Den boende har inte utfört ett sittande toalettbesök på ett dygn. Stående toalettbesök registreras ej.

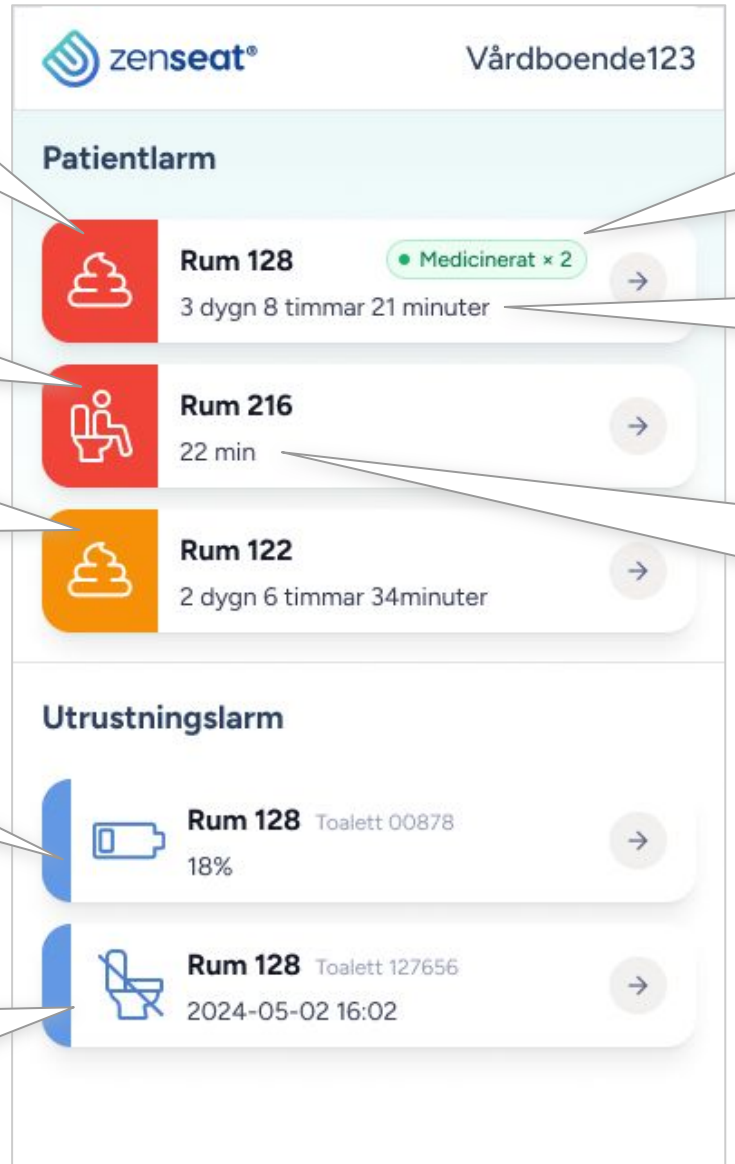


Medicinerat
Visar att den boende har fått medicinering för magen. I detta exemplet har den boende medicinerats två gånger.

Timer - avföringsslarm
Visar hur länge sedan den boende hade avföring på sin toalett senast.


Timer - sittlarm
Visar hur tiden sedan larmet aktiverades. Observera att när larmet aktiveras har den boende suttit 20 minuter på toaletten.

Tryck på ett pågående larm för att öppna vyn för hantering av larmet.

Larmhantering

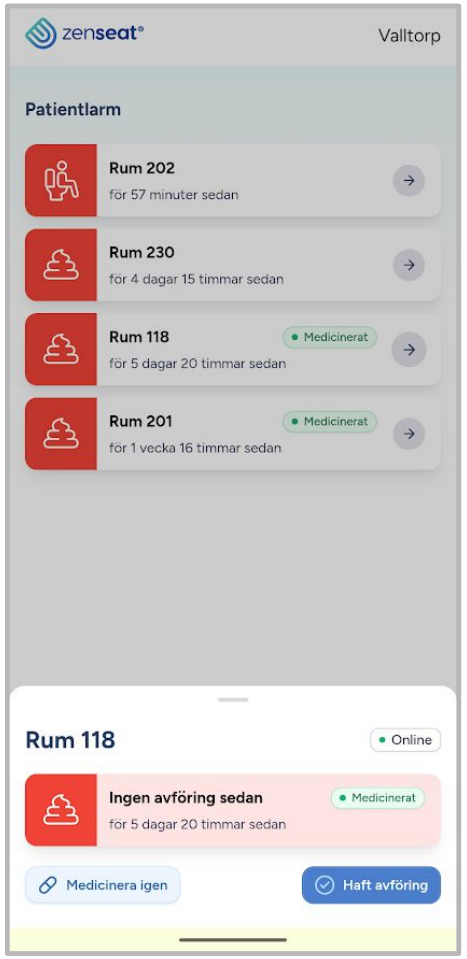


Figur 1

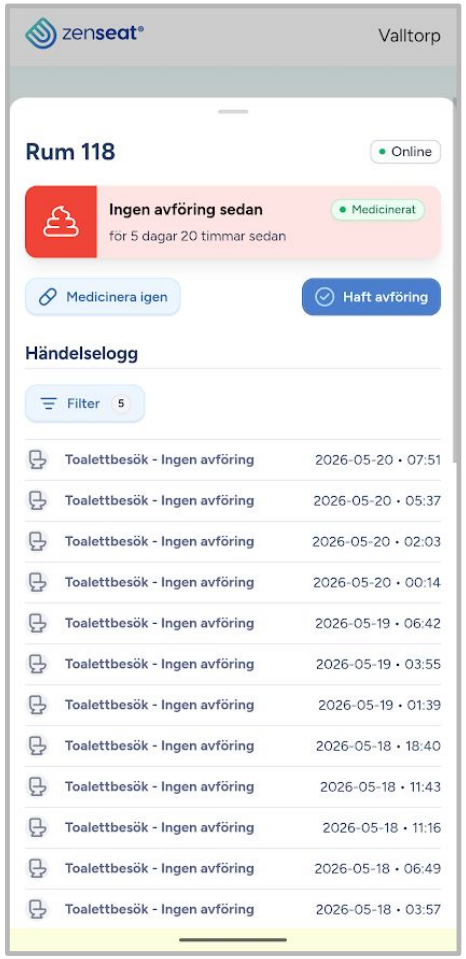

Figur 2

- **Avföringslarm** kvitteras automatiskt om personen haft avföring i sin toalett.
- **Larm för uteblivet toalettbesök** kvitteras automatiskt om den boende går på sin toalett.
- **Larm för toalettbesök längre än 20 minuter** måste kvitteras genom att trycka på larmet och sedan trycka på Hanterat.
- Trycker man på ett aktivt larm i larmvyn öppnar vyn i Figur 1.
- **Utförd medicinering** markeras genom att trycka på knappen Medicinera.
- Om den boende haft avföring någon annanstans kvitteras larmet genom att trycka på **Haft avföring**.
- Dra larmvyn uppåt för att se historiken för två veckor bakåt. Se Figur 2.

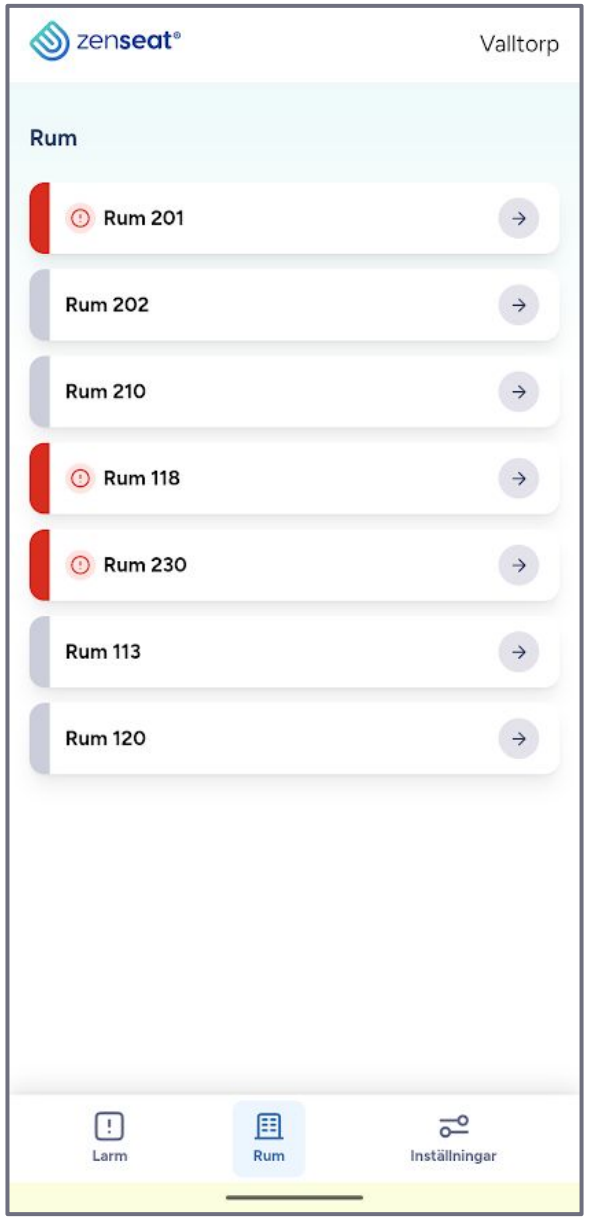


Rumsöversikt

Vyn visar samtliga rum för valt boende med en aktiv ZenSeat®.


Rum med ett pågående larm, patientlarm eller utrustningslarm, är rödmarkerade.

Tryck på ett rum för att öppna vyn med händelseloggen.

Medicinering

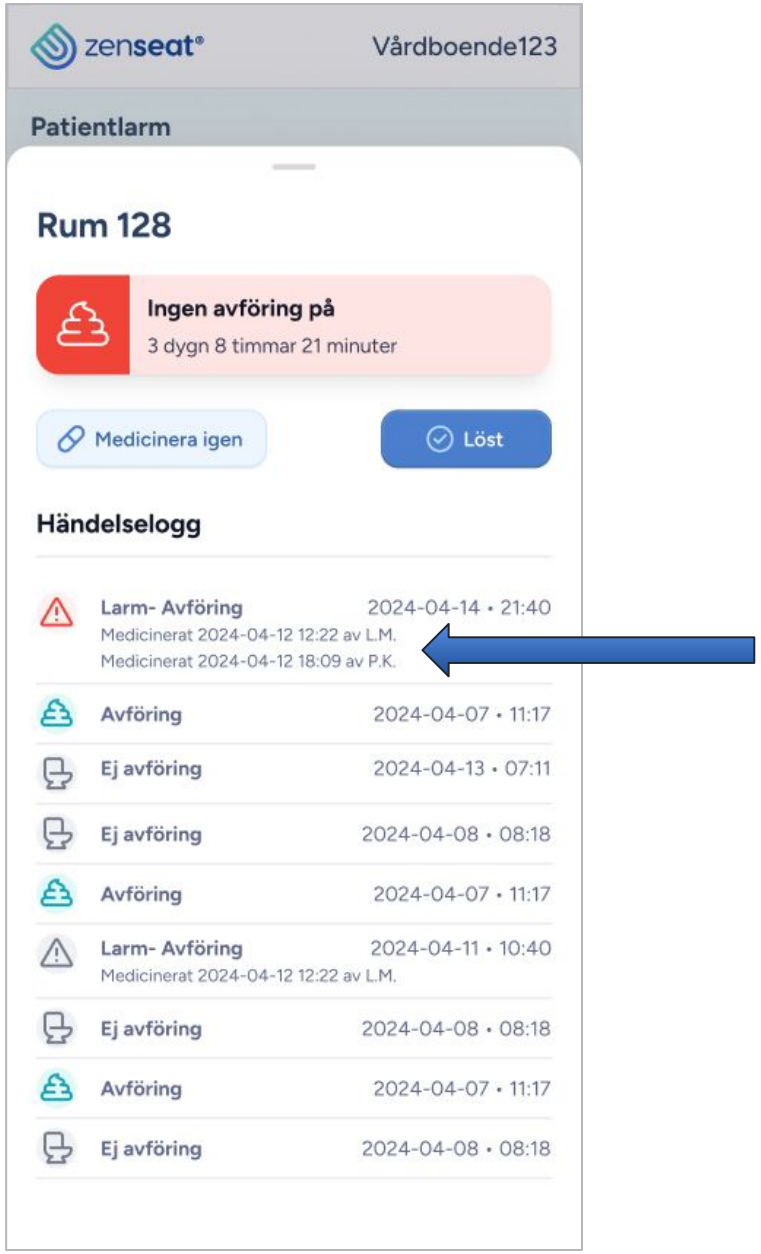


Vid medicinering står det tidpunkt i händelseloggen och initialerna på den som tryckte på knappen.

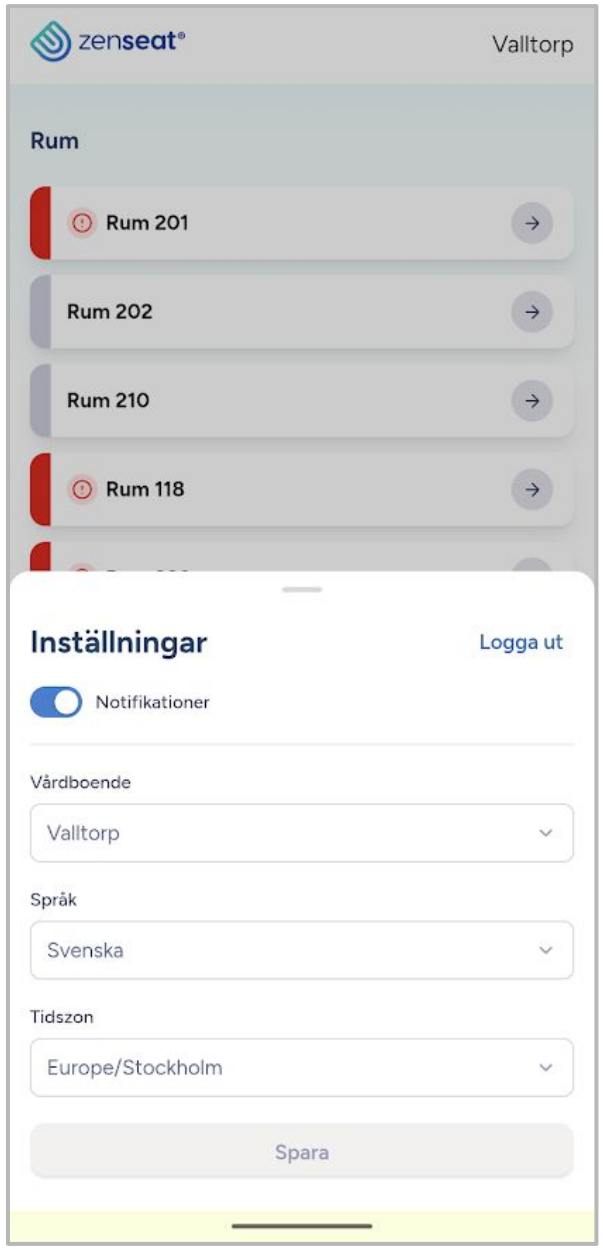


Inställningar

Vy för att välja vårdboende, språk i appen eller byta tidszon.

Här aktiveras även push-notiser för att ge tydligare återkoppling vid nya larm

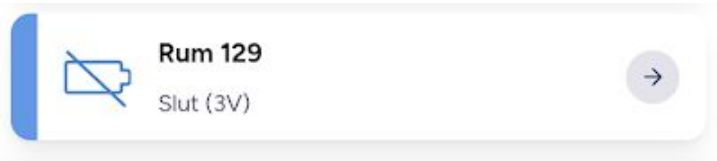

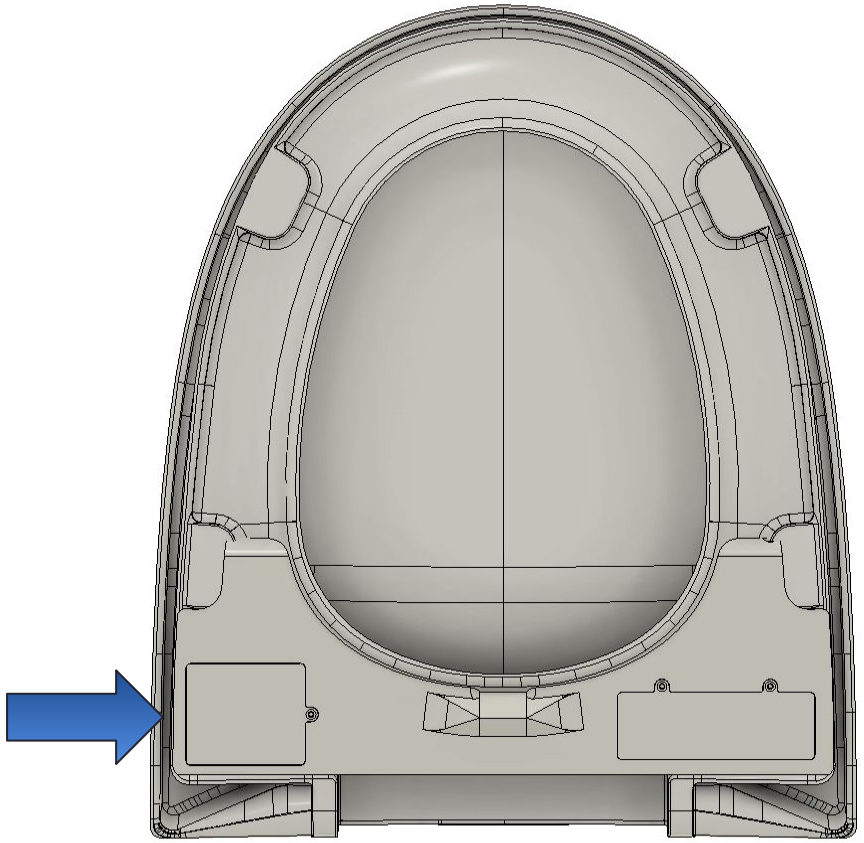


Batteribyte

Byt batterier när ZenSeat® appen larmar för Batteri slut.

- Öppna markerad lucka med en T8-mejsel (Torx 8)
- Sätt i tre nya alkaliska AA batterier av long-life typ.
- Säkerställ att luckans gummipackning sitter på plats när luckan sätts tillbaka.
- Larmet kvitteras automatiskt efter nästa toalettbesök.


Skapa avändare

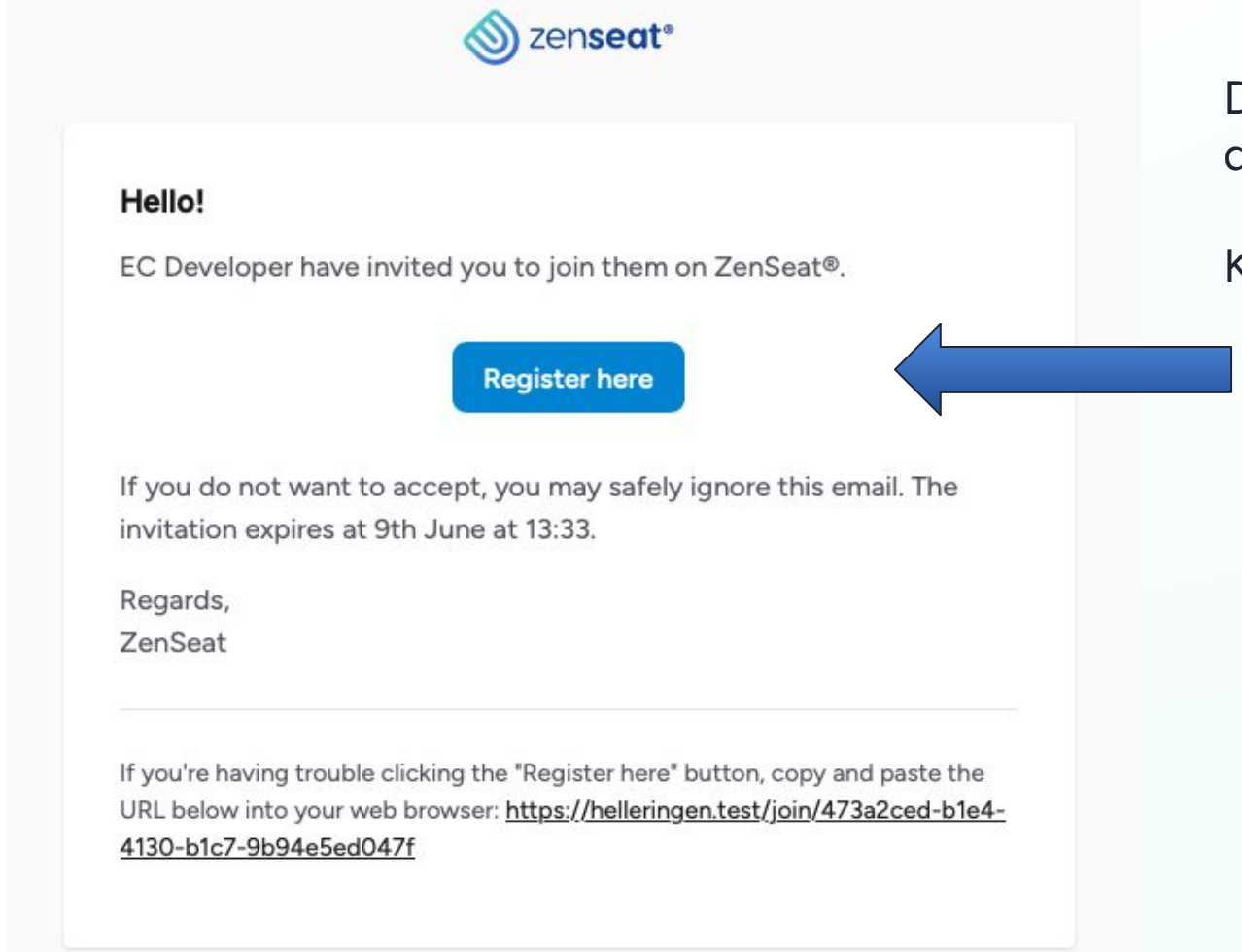

Du får ett mejl med en inbjudan att registrera dig som användare i ZenSeat®.

Klicka på **Register here**

Skapa avändare

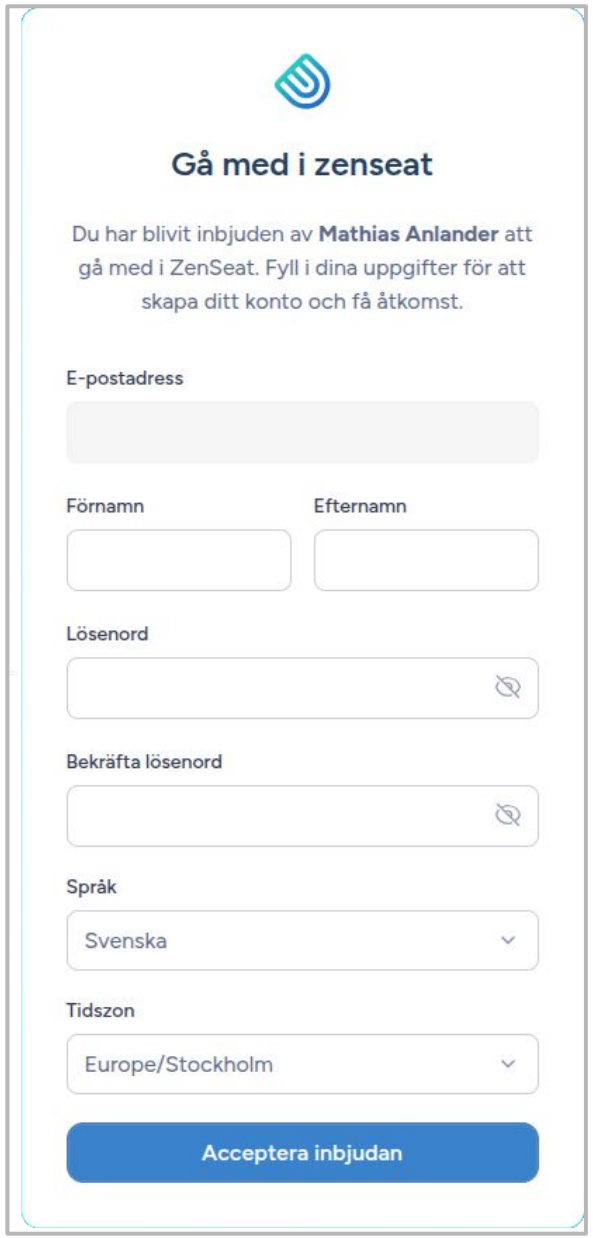

- Fyll i dina uppgifter samt önskat lösenord.
- Lösenordet måste bestå av minst 8 tecken.
- Språk och tidszon kan ändras vid behov.
- Tryck på **Acceptera inbjudan**.
- Du förs nu vidare till appen.


Installation - Android

1. Öppna webbläsaren på telefonen och skriv in adressen:

   app.zenseat.ai

2. Öppna webbläsarens meny och välj

   Lägg till på startskärmen

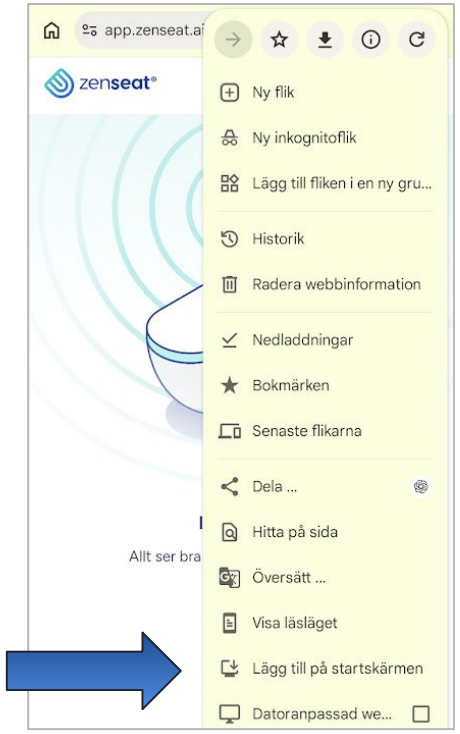

3. Tryck på

   Installera




Installation - iPhone

1. Öppna webbläsaren på telefonen och skriv in adressen:


   app.zenseat.ai

2. Välj dela-ikonen längst ner på sidan.

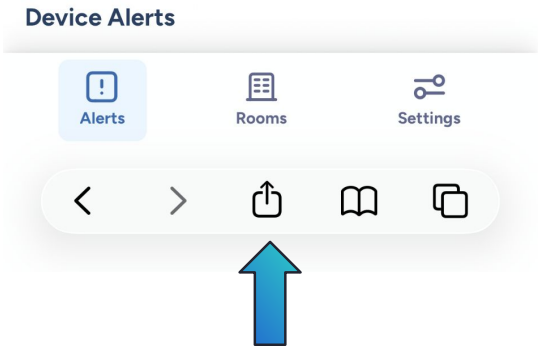

3. Scrolla ned och hitta

   Lägg till på hemskärmen

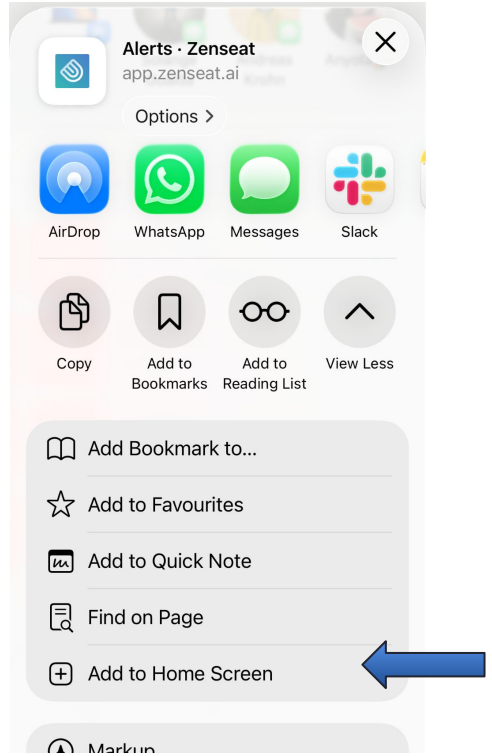

Historik

Datum	Kommentar
2026-05-20	Initialt upprättande av dokument
2026-05-21	Grafisk justering av innehåll
2026-10-22	Justering av larmvyn